



# V100

## CHEMICAL RESISTANT GLOVES

### L (9) ~ XXL (11)

Manufactured by:  
LANON Protection Technology Co., Ltd  
Suite T1–2302, SOHO Tianshan Plaza, Changning, Shanghai, China

Distributed by:  
LANON Protection LLC  
2275 Huntington Dr., PO BOX 810, SAN MARINO, CA, 91108, USA  
LANON is a registered trademark of LANON Protection LLC.  
Email: info@lanonpro.com



GOAL REACH CONSULTING LTD  
OFFICE 1029 3 HARDMAN STREET 10TH FLOOR,  
SPINNINGFIELDS MANCHESTER, UK M3 3HF  
goalSERVICE@hotmail.com

MJCM GmbH  
Römeracker 9 76297 stutensee  
mjcm190928@gmail.com



EN:

#### Information and user instructions

Please read and understand the entire manual before using the gloves. For detailed information on the gloves' performance and limitations, refer to the sections on warnings, maintenance, and usage instructions.

These gloves are designed and manufactured in accordance with the EU Regulation 2016/425 on Personal Protective Equipment (PPE), please go to: <https://www.lanonpro.com/pages/declarations-of-conformity>.

A copy of the EU Declaration of Conformity can be obtained from LANON upon request. These gloves are classified as Category III, providing protection against high-level risks, including chemical exposure and other serious hazards. This product is designed to minimize the risk of injury and provide protection against general mechanical hazards as well as selected chemical risks, in compliance with EN 388 and EN 374 standards.

**Product Purpose:** These gloves are designed for protection against chemical and mechanical risks.

**Inspection Before Use:** Always inspect gloves for any defects, wear, or degradation in material integrity before use, especially in environments with chemical exposure. Do not use damaged, dirty, or worn-out gloves.

**Duration of Use:** Prolonged exposure to chemicals may reduce the protective efficacy of gloves. Regularly inspect hands and gloves for signs of wear, irritation, or material degradation, and replace gloves as necessary.

**Proper Fit:** Ensure the gloves fit properly. Ill-fitting gloves can impair dexterity and increase the risk of accidents or chemical exposure.

**How to Wear:** Ensure hands are clean and dry. Select the appropriate size glove. Insert each hand into the corresponding glove. Adjust the fit for comfort and dexterity.

**Proper Removal:** Pinch the palm area of one glove and peel it off the hand, ensuring that no chemical or contaminant comes into contact with the skin.


**Cleaning / maintenance:** This product should be cleaned with a damp cloth (warm water) without chemicals or by brushing and dried in the air. Frequent cleaning or improper cleaning may reduce the protective performance of the gloves. Chemical-resistant gloves should be replaced rather than cleaned when heavily contaminated. Cleaning methods involving harsh detergents or high temperatures can degrade the chemical protection offered by the gloves.

**Storage:** Keep away from direct sunlight, store in a cool dry place. Keep away from ozone sources or naked flame.

**Proper Disposal:** After use, especially in environments exposed to hazardous chemicals or biological hazards, used gloves may be contaminated with dangerous substances or infectious agents. Dispose of the gloves in accordance with Local Authority Regulations for hazardous or biohazardous materials. To prevent contamination or environmental damage, landfill or incinerate the gloves under controlled conditions as required.

#### Protective Gloves for Mechanical Risks (EN 388:2016+A1:2018)

All tests were carried out under laboratory conditions on the palm of the hand. Respective performance levels were determined on this basis.

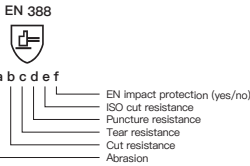

|                      |        |
|----------------------|--------|
| EN impact protection | yes/no |
| ISO cut resistance   | A–F    |
| Puncture resistance  | 0–4    |
| Tear resistance      | 0–4    |
| Cut resistance       | 0–5    |
| Abrasion             | 0–4    |




All performance levels in accordance with EN 388:2016+A1:2018 (highest performance level: 4, for cut resistance: 5, for ISO cut resistance: F) only apply to the palm area of the glove. Level X can also be applied for a to e and stands for "Not tested" or "Not applicable". For dulling during the cut resistance test, the coupe test results are only indicative while the TDM cut resistance test is the reference performance result.

#### Protective Gloves Against Dangerous Chemicals (EN ISO 374–1:2016)

These gloves have been tested and certified for protection against dangerous chemicals, in accordance with the requirements of EN ISO 374–1:2016. The gloves provide an effective barrier against chemical hazards, ensuring robust protection in environments where exposure to hazardous substances is likely.

#### Pictogram and performance levels in accordance with EN 374:2016

Safety gloves for protection against chemicals are classified into three types depending on their permeation performance:

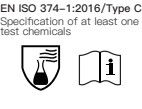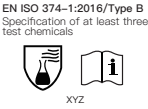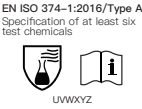

#### List of Tested Chemicals in Accordance with EN ISO 374–1:2016:

| CODE LETTER | CHEMICAL               | CAS NUMBER | CLASS                               |
|-------------|------------------------|------------|-------------------------------------|
| A           | Methanol               | 67–56–1    | Primary alcohol                     |
| B           | Acetone                | 67–64–1    | Ketone                              |
| C           | Acetonitrile           | 75–05–8    | Nitrile compound                    |
| D           | Dichloromethane        | 75–09–2    | Chlorinated hydrocarbon             |
| E           | Carbon disulphide      | 75–15–0    | Sulphur containing organic compound |
| F           | Toluene                | 108–88–3   | Aromatic hydrocarbon                |
| G           | Diethylamine           | 109–89–7   | Amine                               |
| H           | Tetrahydrofuran        | 109–99–9   | Heterocyclic and ether compound     |
| I           | Ethyl acetate          | 141–78–6   | Ester                               |
| J           | n-Heptane              | 142–82–5   | Saturated hydrocarbon               |
| K           | Sodium hydroxide 40%   | 1310–73–2  | Inorganic base                      |
| L           | Sulphuric acid 96%     | 7664–93–9  | Inorganic mineral acid, oxidizing   |
| M           | Nitric acid 65%        | 7697–37–2  | Inorganic mineral acid, oxidizing   |
| N           | Acetic acid 99%        | 64–19–7    | Organic acid                        |
| O           | Ammonium hydroxide 25% | 1336–21–6  | Organic base                        |
| P           | Hydrogen peroxide 30%  | 7722–84–1  | Peroxide                            |
| S           | Hydrofluoric acid 40%  | 7664–39–3  | Inorganic mineral acid              |
| T           | Formaldehyde 37%       | 50–00–0    | Aldehyde                            |

#### Permeation Performance Levels Reference Table:

| Permeation Performance Levels    |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Measured Breakthrough Time (min) | Permeation Performance Level |
| >10                              | 1                            |
| >30                              | 2                            |
| >60                              | 3                            |
| >120                             | 4                            |
| >240                             | 5                            |
| >480                             | 6                            |

This information does not reflect the actual duration of protection in the workplace and the differentiation between mixtures and pure chemicals.

The chemical resistance has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm only (except in cases where the glove is equal to or over 400 mm – where the cuff s tested also) and relates only to the chemical tested. It can be different if the chemical is used in a mixture.

It is recommended to check that the gloves are suitable for the intended use because the conditions at the workplace may differ from the type test depending on temperature, abrasion and degradation.

When used, protective gloves may provide less resistance to the dangerous chemical due to changes in physical properties. Movements, snagging, rubbing, degradation caused by the chemical contact etc. may reduce the actual use time significantly. For corrosive chemicals, degradation can be the most important factor to consider in selection of chemical resistant gloves.

Before usage, inspect the gloves for any defect or imperfections.

#### Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms (EN ISO 374–5:2016)

These gloves have been tested and certified for protection against bacteria, fungi, and (if applicable) viruses, in accordance with the requirements of EN ISO 374–5:2016. The gloves provide an effective barrier against microorganisms, ensuring high-level protection in environments exposed to biological hazards.

#### Pictogram and Performance Levels:

The gloves meet the standards for protection against microorganisms, and the following pictogram indicates their compliance:



If the gloves are certified for viral protection, the pictogram will include the designation "VIRUS", confirming they have passed additional testing for viral protection.



While these gloves provide robust protection against microorganisms, their effectiveness may decrease under harsh chemical exposure or after repeated use. Users should inspect gloves regularly and replace them if they show signs of damage, wear, or degradation.

#### Penetration Resistance:

The penetration resistance has been assessed under laboratory conditions in accordance with EN 374–2 and relates only to the tested specimen.

**Warning:** Plastic bags can be dangerous. To avoid the risk of suffocation, keep this bag away from babies and children. Some gloves might contain ingredients which are known to be a possible cause of allergies in sensitized persons. If allergic reactions should occur, obtain medical advice immediately. It should not be worn when there is a risk of entanglement with moving machine parts. Not suitable for use near open flames, high-heat environments, sharp objects, pointed objects or for electrical work.

#### Expiration date:



#### Production date:



#### Manufacture



#### CE marking



Read the manufacture's instructions and information

MADE IN CHINA

Informationen und Benutzeranweisungen

Bitte lesen und verstehen Sie das gesamte Handbuch, bevor Sie die Handschuhe verwenden. Fr detaillierte Informationen zu den Leistungen und Einschränkungen der Handschuhe siehe Abschnitte zu Warnungen, Wartung und Gebrauchsanweisungen. Diese Handschuhe wurden gemäß der EU–Verordnung 2016/425 ü ber persönliche Schutzausrüstung (PSA) entworfen und hergestellt, verbinden: <https://www.lanonpro.com/pages/declarations-of-conformity>.

Eine Kopie der EU–Konformitätserklärung kann auf Anfrage von LANON bezogen werden. Diese Handschuhe sind der Kategorie III zugeordnet und bieten Schutz vor hohen Risiken, einschließlich Chemikalienexposition und anderen ernststen Gefahren. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, das Verletzungsrisiko zu minimieren und Schutz vor allgemeinen mechanischen Gefahren sowie ausgewählten chemischen Risiken zu bieten, gemäß den Normen EN 388 und EN 374.

**Produktzweck:** Diese Handschuhe sind für allgemeinen mechanischen Schutz, Gartenarbeit und industrielle Nutzung konzipiert.

**Inspektion vor Gebrauch:** Überprüfen Sie die Handschuhe vor dem Gebrauch immer auf Mängel oder Unvollkommenheiten. Verwenden Sie keine beschädigten, schnutzigen oder abgenutzten Handschuhe.

**Gebrauchsdauer:** Längeres Tragen von Handschuhen in bestimmten Umgebungen kann Unbehagen verursachen. Machen Sie regelmäßige Pausen, um Ihre Hände auf Anzeichen von Reizungen oder Ermüdung zu überprüfen.

**Richtige Passform:** Stellen Sie sicher, dass die Handschuhe richtig passen. Schlecht sitzende Handschuhe können die Geschicklichkeit beeinträchtigen und das Unfallrisiko erhöhen.

**Reinigung/Wartung:** Dieses Produkt sollte mit einem feuchten Tuch (warmes Wasser) ohne Chemikalien oder durch Bü rsten gereinigt und an der Luft getrocknet werden. Häufiges oder unsachgemäßes Reinigen kann die Schutzleistung der Handschuhe verringern. Chemikalienbe–ständige Handschuhe sollten bei starker Kontamination ausgetauscht und nicht gereinigt werden. Reinigungsmethoden mit aggressiven Reinigungsmitteln oder hohen Temperaturen können den chemischen Schutz der Handschuhe beeinträchtigen.

**Lagerung:** Von direkter Sonneneinstrahlung fernhalten, an einem kühlen, trockenen Ort lagern. Von Ozonquellen oder offener Flamme fernhalten.

**Ordnungsgemäße Entsorgung:** Nach dem Gebrauch, insbesondere in Umgebungen, die gefährlichen Chemikalien oder biologischen Gefahren ausgesetzt sind, können gebrauchte Handschuhe mit gefährlichen Stoffen oder infektiösen Erregern kontaminiert sein. Entsorgen Sie die Handschuhe gemäß den örtlichen Vorschriften fü r gefährliche oder biologische Abfälle. Um Kontaminationen oder Umweltschäden zu vermeiden, deponieren oder verbrennen Sie die Handschuhe unter kontrollierten Bedingungen, wie vorgeschrieben.

Schutzhandschuhe für mechanische Risiken (EN 388:2016+A1:2018)

Alle Tests wurden unter Laborbedingungen an der Handfläche durchgefü hrt. Die jeweiligen Leistungsstufen wurden auf dieser Grundlage bestimmt.

EN 388

a b c d e f

EN–Aufprallschutz (J (a/n))

ISO–Schnittfestigkeit

Durchstichfestigkeit

Reißfestigkeit

Schnittfestigkeit

Abriebfestigkeit

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| EN–Aufprallschutz     | ouI/non |
| ISO–Schnittfestigkeit | A–F     |
| Durchstichfestigkeit  | 0–4     |
| Reißfestigkeit        | 0–4     |
| Schnittfestigkeit     | 0–5     |
| Abriebfestigkeit      | 0–4     |

Alle Leistungsstufen gemäß EN 388: 2016+A1:2018 (höchste Leistungsstufe: 4, für Schnittfestigkeit: 5, für ISO–Schnittfestigkeit: F) gelten nur für den Handflächenbereich des Handschuhs. Stufe X kann auch für a bis e angewendet werden und steht für "Nicht getestet" oder "Nicht anwendbar". Bei der Abstumpfung während des Schnittfestigkeitstests sind die Ergebnisse des Coup–Tests nur indikativ, während der TDM–Schnittfestigkeitstest das Referenzleistungsergebnis darstellt.

Schutzhandschuhe gegen gefährliche Chemikalien (EN ISO 374–1:2016)

Diese Handschuhe wurden gemäß den Anforderungen der EN ISO 374–1:2016 getestet und zertifiziert, um Schutz vor gefährlichen Chemikalien zu bieten. Die Handschuhe bilden eine wirksame Barriere gegen chemische Gefahren und gewährleisten robusten Schutz in Umgebungen, in denen ein Kontakt mit gefährlichen Stoffen wahrscheinlich ist.

Piktogramm und Leistungsstufen gemäß EN 374:2016

Informations et instructions d'utilisation

Veuillez lire et comprendre l'intégralité du manuel avant d'utiliser les gants. Pour des informations détaillées sur les performances et les limitations des gants, consultez les sections sur les avertissements, l'entretien et les instructions d'utilisation.

Ces gants sont conçus et fabriqués conformément au règlement UE 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle (EPI), lier: <https://www.lanonpro.com/pages/declarations-of-conformity>.

Une copie de la déclaration de conformité de l'UE peut être obtenue auprès de LANON sur demande. Ces gants sont classés en catégorie III, offrant une protection contre les risques élevés, y compris l'exposition aux produits chimiques et d'autres dangers graves. Ce produit est conçu pour minimiser le risque de blessure et fournir une protection contre les risques mécaniques généraux ainsi que certains risques chimiques, conformément aux normes EN 388 et EN 374.

**But du produit :** Ces gants sont conçus pour protéger contre les risques chimiques et mécaniques.

**Inspection avant utilisation :** Toujours inspecter les gants pour détecter tout défaut, usure ou dégradation de l'intégrité du matériau avant utilisation, en particulier dans les environnements exposés aux produits chimiques. N'utilisez pas de gants endommagés, sales ou usés.

**Durée d'utilisation :** Une exposition prolongée aux produits chimiques peut réduire l'efficacité protectrice des gants. Inspectez régulièrement vos mains et vos gants pour tout signe d'usure, d'irritation ou de dégradation du matériau et remplacez–les si nécessaire.

**Ajustement approprié :** Assurez–vous que les gants sont bien ajustés. Des gants mal ajustés peuvent nuire à la dextérité et augmenter le risque d'accidents ou d'exposition aux produits chimiques.

**Comment porter :** Assurez–vous que vos mains sont propres et sèches. Sélectionnez la taille de gants appropriée. Insérez chaque main dans le gant correspondant. Ajustez le gant pour plus de confort et de dextérité.

**Retrait correct :** Pincez la zone de la paume d'un gant et retirez–le de la main, en veillant à ce qu'aucun produit chimique ou contaminant n'entre en contact avec la peau.

**Nettoyage / entretien :** Ce produit doit être nettoyé avec un chiffon humide (eau tiède) sans produits chimiques ou par brossage, et séché à l'air. Un nettoyage fréquent ou inapproprié peut réduire la performance protectrice des gants. Les gants résistants aux produits chimiques doivent être remplacés plutôt que nettoyés lorsqu'ils sont fortement contaminés. Les méthodes de nettoyage impliquant des détergents agressifs ou des températures élevées peuvent dégrader la protection chimique offerte par les gants.

**Stockage :** Tenir à l'écart de la lumière directe du soleil, ranger dans un endroit frais et sec. Tenir à l'écart des sources d'ozone ou des flammes nues.

**Élimination correcte :** Après utilisation, notamment dans des environnements exposés à des produits chimiques dangereux ou à des risques biologiques, les gants usagés peuvent être contaminés par des substances dangereuses ou des agents infectieux. Éliminez les gants conformément aux règlements des autorités locales concernant les matières dangereuses ou biohazardeuses. Pour éviter la contamination ou les dommages environnementaux, enfouissez ou incinérez les gants dans des conditions contrôlées comme requis.

Gants de protection contre les risques mécaniques (EN 388:2016+A1:2018)

Tous les tests ont été réalisés dans des conditions de laboratoire sur la paume de la main. Les niveaux de performance respectifs ont été déterminés sur cette base.

EN 388

a b c d e f

Protection contre les impacts EN (ouI/non)

Résistance aux coupures ISO

Résistance à la perforation

Résistance à la

Résistance aux

Résistance à l'abrasion

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| EN impact protection        | ouI/non |
| Résistance aux coupures ISO | A–F     |
| Résistance à la perforation | 0–4     |
| Résistance à la             | 0–4     |
| Résistance aux              | 0–5     |
| Résistance à l'abrasion     | 0–4     |

Tous les niveaux de performance conformément à EN 388:2016+A1:2018 (niveau de performance le plus élevé : 4, pour la résistance aux coupures : 5, pour la résistance aux coupures ISO : F) ne s'appliquent qu'à la paume du gant. Le niveau X peut également être appliqué pour a à e et signifie "Non testé" ou "Non applicable".

Schutzhandschuhe gegen Chemikalien werden je nach ihrer Durchdringungsleistung in drei Typen eingeteilt:

EN ISO 374–1:2016/Type A

Spezifikation von mindestens sechs Prüfchemikalien

U V W X Y Z

EN ISO 374–1:2016/Type B

Spezifikation von mindestens drei Prüfchemikalien

X Y Z

EN ISO 374–1:2016/Type C

Spezifikation von mindestens einer Prüfchemikalie

Liste der geprüften Chemikalien gemäß EN ISO 374–1:2016:

| KENNBUCHSTABE | CHEMIE                     | CAS–NUMMER | KLASSE                                |
|---------------|----------------------------|------------|---------------------------------------|
| A             | Methanol                   | 67–56–1    | Primärer Alkohol                      |
| B             | Aceton                     | 67–64–1    | Keton                                 |
| C             | Acetonitril                | 75–05–8    | Nitrilverbindung                      |
| D             | Dichlormethan              | 75–09–2    | Chlorierter Kohlenwasserstoff         |
| E             | Kohlenstoffdisulfid        | 75–15–0    | Schwefelhaltige organische Verbindung |
| F             | Toluol                     | 108–88–3   | Aromatischer Kohlenwasserstoff        |
| G             | Diethylamin                | 109–89–7   | Amin                                  |
| H             | Tetrahydrofuran            | 109–99–9   | Heterozyklische und Etherverbindung   |
| I             | Ethylacetat                | 141–78–6   | Ester                                 |
| J             | n–Heptan                   | 142–82–5   | Gesättigter Kohlenwasserstoff         |
| K             | Natriumhydroxid 40 %       | 1310–73–2  | Anorganische Base                     |
| L             | Schwefelsäure 96 %         | 7664–93–9  | Anorganische Mineralsäure, oxidierend |
| M             | Salpetersäure 65 %         | 7697–37–2  | Anorganische Mineralsäure, oxidierend |
| N             | Essigsäure 99 %            | 64–19–7    | Organische Säure                      |
| O             | Ammoniumhydroxid 25 %      | 1336–21–6  | Organische Base                       |
| P             | Wasserstoffperoxid 30 %    | 7722–84–1  | Peroxid                               |
| S             | Fluorwasserstoffsäure 40 % | 7664–39–3  | Anorganische Mineralsäure             |
| T             | Formaldehyd 37 %           | 50–00–0    | Aldehyd                               |

Referenztablelle der Durchdringungsleistungsstufen:

| Permeationsleistungsstufen     |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Gemessene Durchbruchzeit (min) | Permeationsleistungsstufe |
| >10                            | 1                         |
| >30                            | 2                         |
| >60                            | 3                         |
| >120                           | 4                         |
| >240                           | 5                         |
| >480                           | 6                         |

Diese Information spiegelt nicht die tatsächliche Schutzdauer am Arbeitsplatz wider und unterscheidet nicht zwischen Mischungen und reinen Chemikalien.

Die chemische Beständigkeit wurde unter Laborbedingungen anhand von Proben, die nur von der Handfläche entnommen wurden (außer bei Handschuhen mit einer Länge von 400 mm oder mehr, bei denen auch die Stulpe getestet wird), bewertet und bezieht sich nur auf die getestete Chemikalie. Sie kann unterschiedlich sein, wenn die Chemikalie in einer Mischung verwendet wird.

Es wird empfohlen zu überprüfen, ob die Handschuhe für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet sind, da die Bedingungen am Arbeitsplatz je nach Temperatur, Abrieb und Abnutzung vom Typentest abweichen können.

Bei Gebrauch können Schutzhandschuhe aufgrund von Veränderungen der physika–lischen Eigenschaften weniger Widerstand gegen die gefährliche Chemikalie bieten. Bewegungen, Hängenbleiben, Reibung und Abnutzung durch Kontakt mit der Chemikalie können die tatsächliche Nutzungsdauer erheblich verkürzen. Bei korrosiven Chemikalien kann die Abnutzung der wichtigste Faktor bei der Auswahl chemikalien–beständiger Handschuhe sein.

Vor der Benutzung überprüfen Sie die Handschuhe auf Mängel oder Unvollkommenheiten.

Protective gloves against dangerous chemicals and micro–organisms (EN ISO 374–5:2016)

Pour l'émoussement lors du test de résistance aux coupures, les résultats du test de coupe sont uniquement indicatifs tandis que le test de résistance aux coupures TDM est le résultat de performance de référence.

Gants de protection contre les produits chimiques dangereux (EN ISO 374–1:2016)

Ces gants ont été testés et certifiés pour protéger contre les produits chimiques dangereux, conformément aux exigences de la norme EN ISO 374–1:2016. Ils offrent une barrière efficace contre les dangers chimiques, assurant une protection robuste dans les environnements où l'exposition à des substances dangereuses est probable.

Pictogramme et niveaux de performance conformément à EN 374:2016

Les gants de protection contre les produits chimiques sont classés en trois types selon leurs performances de perméation :

EN ISO 374–1:2016/Type A

Spécification d'au moins six produits chimiques de test

U V W X Y Z

EN ISO 374–1:2016/Type B

Spécification d'au moins trois produits chimiques de test

X Y Z

EN ISO 374–1:2016/Type C

Spécification d'au moins un produit chimique de test

Liste des produits chimiques testés conformément à EN ISO 374–1:2016 :

| LETTRE DE CODE | PRODUIT CHIMIQUE          | NUMÉRO CAS | CLASSE                                |
|----------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|
| A              | Méthanol                  | 67–56–1    | Alcool primaire                       |
| B              | Acétone                   | 67–64–1    | Cétone                                |
| C              | Acétonitrile              | 75–05–8    | Composé nitrile                       |
| D              | Dichlorométhane           | 75–09–2    | Hydrocarbure chloré                   |
| E              | Disulfure de carbone      | 75–15–0    | Composé organique contenant du soufre |
| F              | Toluène                   | 108–88–3   | Hydrocarbure aromatique               |
| G              | Diéthylamine              | 109–89–7   | Amine                                 |
| H              | Tétrahydrofurane          | 109–99–9   | Composé hétérocyclique et éther       |
| I              | Acétate d'éthyle          | 141–78–6   | Ester                                 |
| J              | n–Heptane                 | 142–82–5   | Hydrocarbure saturé                   |
| K              | Hydroxyde de sodium 40 %  | 1310–73–2  | Base inorganique                      |
| L              | Acide sulfurique 96 %     | 7664–93–9  | Acide minéral inorganique, oxydant    |
| M              | Acide nitrique 65 %       | 7697–37–2  | Acide minéral inorganique, oxydant    |
| N              | Acide acétique 99 %       | 64–19–7    | Acide organique                       |
| O              | Hydroxyde d'ammonium 25 % | 1336–21–6  | Base organique                        |
| P              | Peroxyde d'hydrogène 30 % | 7722–84–1  | Peroxyde                              |
| S              | Acide fluorhydrique 40 %  | 7664–39–3  | Acide minéral inorganique             |
| T              | Formaldéhyde 37 %         | 50–00–0    | Aldéhyde                              |

Tableau de référence des niveaux de performance de perméation :

| Niveaux de performance de perméation |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Temps de percée mesuré (min)         | Niveau de performance de perméation |
| >10                                  | 1                                   |
| >30                                  | 2                                   |
| >60                                  | 3                                   |
| >120                                 | 4                                   |
| >240                                 | 5                                   |
| >480                                 | 6                                   |

Ces informations ne reflètent pas la durée réelle de protection en milieu de travail ni la distinction entre les mélanges et les produits chimiques purs.

La résistance chimique a été évaluée en laboratoire à partir d'échantillons prélevés uniquement sur la paume (sauf dans les cas où le gant mesure 400 mm ou plus, où la manchette est également testée) et ne concerne que le produit chimique testé. Cela peut être différent si le produit chimique est utilisé dans un mélange.

Il est recommandé de vérifier que les gants sont adaptés à l'utilisation prévue, car les conditions sur le lieu de travail peuvent différer du test type en fonction de la température, de l'abrasion et de la dégradation.

Diese Handschuhe wurden getestet und zertifiziert zum Schutz gegen Bakterien, Pilze und (falls zutreffend) Viren, gemäß den Anforderungen der EN ISO 374–5:2016. Die Handschuhe bieten eine effektive Barriere gegen Mikroorganismen und gewährleisten einen hohen Schutz in Umgebungen, die biologischen Gefahren ausgesetzt sind.

Piktogramm und Leistungsstufen:

Die Handschuhe entsprechen den Standards für den Schutz gegen Mikroorganismen, und das folgende Piktogramm zeigt deren Übereinstimmung an:

Wenn die Handschuhe für den Virenschutz zertifiziert sind, enthält das Piktogramm die Bezeichnung "VIRUS", was bestätigt, dass sie zusätzliche Tests für den Virenschutz bestanden haben.

Obwohl diese Handschuhe einen starken Schutz gegen Mikroorganismen bieten, kann ihre Wirksamkeit bei starker chemischer Exposition oder nach wiederholtem Gebrauch abnehmen. Benutzer sollten die Handschuhe regelmäßig überprüfen und bei Anzeichen von Schäden, Abnutzung oder Verschlechterung ersetzen.

Durchdringungswiderstand:

Der Durchdringungswiderstand wurde unter Laborbedingungen gemäß EN 374–2 bewertet und bezieht sich nur auf das getestete Exemplar.

**Warnung:** Plastiktüten können gefährlich sein. Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie diese Tasche von Babys und Kindern fern. Einige Handschuhe können Inhaltsstoffe enthalten, die bekanntermaßen bei empfindlichen Personen Allergien auslösen können. Wenn allergische Reaktionen auftreten, suchen Sie sofort ärztlichen Rat. Sie sollten nicht getragen werden, wenn die Gefahr des Verfangens in beweglichen Maschinenteilen besteht. Nicht geeignet für den Einsatz in der Nähe von offenen Flammen, Umgebungen mit hohen Temperaturen, scharfen Gegenständen, spitzen Gegenständen oder Elektroarbeiten.

Ablaufdatum:

Monat/Jahr

Produktionsdatum:

Monat/Jahr

Hersteller

CE–Kennzeichnung

Lesen Sie die Anweisun–gen und Informationen des Herstellers

Hergestellt in China

Lors de leur utilisation, les gants de protection peuvent offrir une résistance moindre aux produits chimiques dangereux en raison de changements dans les propriétés physiques. Les mouvements, les accrochages, les frottements, la dégradation causée par le contact avec les produits chimiques, etc., peuvent réduire considérablement le temps d'utilisation réel. Pour les produits chimiques corrosifs, la dégradation peut être le facteur le plus important à considérer dans le choix des gants résistants aux produits chimiques.

Avant utilisation, inspectez les gants pour détecter tout défaut ou imperfection.

Gants de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro–organismes (EN ISO 374–5:2016)

Ces gants ont été testés et certifiés pour la protection contre les bactéries, les champignons et (le cas échéant) les virus, conformément aux exigences de la norme EN ISO 374–5:2016. Les gants offrent une barrière efficace contre les micro–orga–nismes, garantissant une protection élevée dans les environnements exposés aux dangers biologiques.

Pictogramme et niveaux de performance :

Les gants répondent aux normes de protection contre les micro–organismes, et le pictogramme suivant indique leur conformité :

Si les gants sont certifiés pour la protection contre les virus, le pictogramme comprendra la mention "VIRUS", confirmant qu'ils ont passé des tests supplémentaires pour la protection virale.

Bien que ces gants offrent une protection robuste contre les micro–organismes, leur efficacité peut diminuer sous une exposition chimique intense ou après une utilisation répétée. Les utilisateurs doivent inspecter régulièrement les gants et les remplacer s'ils montrent des signes de dommages, d'usure ou de dégradation.

Résistance à la pénétration :

La résistance à la pénétration a été évaluée dans des conditions de laboratoire conformément à la norme EN 374–2 et ne concerne que l'échantillon testé.

**Avertissement:** Les sacs en plastique peuvent être dangereux. Pour éviter les risques d'étouffement, gardez ce sac hors de portée des bébés et des enfants. Certains gants peuvent contenir des ingrédients connus pour être une cause possible d'allergies chez les personnes sensibilisées. En cas de réactions allergiques, consultez immédiatement un médecin. Ils ne doivent pas être portés en cas de risque d'enchevêtrement avec des pièces de machine en mouvement. Ne convient pas pour une utilisation à proximité de flammes nues, d'environnements à haute température, d'objets tranchants, d'objets pointus ou de travaux électriques.

Date d'expiration:

Mois/Année

Date de production:

Mois/Année

Fabricant

Marquage CE

Lisez les instructions et informations du fabricant

Fabriqué en Chine









## Informacje i instrukcje dla użytkownika

Przeczytaj i zrozum całą instrukcję przed użyciem rękawiczek. Aby uzyskać więcej informacji na temat wydajności i ograniczeń indywidualnej (PPE), połącząc: <https://www.lanonpro.com/pages/declarations-of-conformity>.

Te rękawice zostały zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/425 w sprawie środków w ochronę indywidualnej (PPE), połącząc: <https://www.lanonpro.com/pages/declarations-of-conformity>.

Kopię Deklaracji Zgodności UE można uzyskać od firmy LANON na żądanie. Te rękawice są sklasyfikowane jako kategoria III, zapewniając ochronę przed wysokimi zagrożeniami, w tym ekspozycją na chemikalia i inne poważne zagrożenia. Ten produkt został zaprojektowany, aby zminimalizować ryzyko obrażeń i zapewnić ochronę przed ogó lnymi zagrożeniami mechanicznymi oraz wybranymi zagrożeniami chemicznymi, zgodnie z normami EN 388 i EN 374.

**Cel produktu:** Te rękawice są przeznaczone do ochrony przed zagrożeniami chemicznymi i mechanicznymi.

**Inspekcja przed użyciem:** Zawsze sprawdzaj rękawice pod kątem wad, zużycia lub degradacji materiału przed użyciem, szczegó lnie w środowiskach z narażeniem na chemikalia. Nie używaj uszkodzonych, brudnych ani zużytych rękawic.

**Czas użytkowania:** Długotrwała ekspozycja na chemikalia może zmniejszyć skuteczność ochronną rękawic. Regularnie sprawdzaj ręce i rękawice pod kątem oznak zużycia, podrażnienia lub degradacji materiału i w razie potrzeby wymień rękawice.

**Odpowiednie dopasowanie:** Upewnij się, że rękawice dobrze pasują. Żle dopasowane rękawice mogą wpłynąć na zręczność i zwiększyć ryzyko wypadków w lub narażenia na chemikalia.

**Jak nosić:** Upewnij się, że dłonie są czyste i suche. Wybierz odpowiedni rozmiar rękawiczek. Włó z każdą dłoń do odpowiedniej rękawicy. Dopasuj rękawice dla komfortu i zręczności.

**Prawidłowe zdejmowanie:** Uszczypnij obszar dłoni jednej rękawicy i zdejmij ją z ręki, upewniając się, że żadna substancja chemiczna ani zanieczyszczenie nie dotknie skó ry.

**Czyszczenie/konserwacja:** Produkt należy czyścić wilgotną szmatką (ciepłą wodą) bez użycia środków w chemicznych lub poprzez szczotkowanie, a następnie suszyć na powietrzu. Częste lub niewłaściwe czyszczenie może obniżyć skuteczność ochronną rękawic. Rękawice odporne na chemikalia powinny być wymieniane, a nie czyszczone, gdy są mocno zanieczyszczone. Metody czyszczenia obejmujące silne deterenty lub wysokie temperatury mogą osłabiać ochronę chemiczną oferowaną przez rękawice.

**Przechowywanie:** Przechowywać z dala od bezpośredniego światła słonecznego, w chłodnym i suchym miejscu. Przechowywać z dala od źró deł ozonu lub otwartego ognia.

**Prawidłowa utylizacja:** Po użyciu, szczegó lnie w środowiskach narażonych na niebezpieczne chemikalia lub zagrożenia biologiczne, używane rękawice mogą być skażone niebezpiecznymi substancjami lub czynnikami zakaźnymi. Utylizuj rękawice zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi materiału w niebezpiecznych lub biologicznych. Aby zapobiec zanieczyszczeniu lub szkodom środowiskowym, składaj rękawice na składowisko lub spalaj je w kontrolowanych warunkach zgodnie z wymogami.

### Rękawice ochronne na zagrożenia mechaniczne (EN 388:2016+A1:2018)

Wszystkie testy zostały przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych na obszarze dłoni. Odpowiednie poziomy wydajności zostały określone na tej podstawie.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| EN 388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EN–slagmotstånd. (ja/nej) |
| <div><div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div></div></div> | ISO–skåremotstånd. A–F    |
| a b c d e f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Punkteringsmotstånd. 0–4  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rivmotstånd. 0–4          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Skårmotstånd. 0–5         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nötningsmotstånd. 0–4     |

Wszystkie poziomy wydajności zgodne z EN 388:2016+A1:2018 (najwyższy poziom wydajności: 4, dla odporności na przecięcia: 5, dla odporności na przecięcia ISO: F) odnoszą się wyłącznie do obszaru dłoni rękawicy. Poziom X może również dotyczyć a do e i oznacza "Niebadany" lub "Nie dotyczy". W przypadku tegoego narzędzia podczas testu odporności na przecięcia wyniki testu coup są tylko orientacyjne, podczas gdy test odporności na przecięcia TDM jest testem referencyjnym.

### Bilgi ve kullanım talimatları

Eldivenleri kullanmadan önce tüm kılavuzu okuyun ve anlayın. Eldivenlerin performansı ve sınırlamaları hakkında detaylı bilgi için uyarılar, bakım ve kullanım talimatları bölümlerine bakın.

Bu eldivenler, Kişisel Koruyucu Donanım (PPE) ile ilgili 2016/425 AB Yönetmeliği'ne uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiştir, bağlamak:

<https://www.lanonpro.com/pages/declarations-of-conformity>.

AB Uygunluk Beyanı'nın bir kopyası, talep üzerine LANON'dan temin edilebilir. Bu eldivenler, kimyasal maruziyet ve diğer ciddi tehlikeler dahil olmak üzere yüksek risklere karşı koruma sağlayan Kategori III olarak sınıflandırılmıştır. Bu ürün, yaralanma riskini en aza indirmek ve EN 388 ve EN 374 standartlarına uygun olarak genel mekanik tehlikelere ve belirli kimyasal risklere karşı koruma sağlamak için tasarlanmıştır.

**Ürü n Amacı:** Bu eldivenler, kimyasal ve mekanik risklere karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır.

**Kullanım Öncesi Kontrol:** Eldivenleri kullanmadan önce her zaman kusurlar, aşınma veya malzeme bütünlüğünde bozulma olup olmadığını kontrol edin, özellikle kimyasallara maruz kalma durumlarında. Hasarlı, kirli veya aşınmış eldivenleri kullanmayın.

**Kullanım Süresi:** Kimyasal maddelere uzun süre maruz kalma, eldivenlerin koruyucu etkinliğini azaltabilir. Ellerinizde ve eldivenlerde aşınma, tahriş veya malzeme bozulması belirtilerini düzenli olarak kontrol edin ve gerekirse eldivenleri değiştirin.

**Uygun Fit:** Eldivenlerin düzgün oturduğundan emin olun. Uygun şekilde oturmayan eldivenler, beceriyi azaltabilir ve kaza veya kimyasal maruziyeti riskini artırabilir.

**Nasıl giyilir:** Ellerinizi temiz ve kuru tutun. Doğru boyutta eldiven seçin. Her elinizi ilgili eldivene yerleştirin. Konfor ve el becerisi için uyumu ayarlayın.

**Doğru Çıkarma:** Bir eldivenin avuç kısmını sıkın ve hiçbir kimyasal veya kirlетici maddenin cilde temas etmediğinden emin olarak elden çıkarn.

**Temizlik/Bakım:** Bu ürün kimyasallar kullanılmadan nemli bir bez (ılık su) ile temizlenmeli veya fırçalanmalı ve havada kurutulmalıdır. Sık temizlik veya uygunsuz temizlik, eldivenlerin koruyucu performansını azaltabilir. Kimyasal dirençli eldivenler, ağır kirlenme durumunda temizlenmek yerine değiştirilmelidir. Sert deterjanlar veya yüksek sıcaklıklar içeren temizlik yöntemleri, eldivenlerin sağladığı kimyasal korumayı bozabilir.

**Depolama:** Doğrudan güneş ışığından uzak, serin ve kuru bir yerde saklayın. Ozon kaynaklarından veya açık alevden uzak tutun.

**Doğru Bertaraf:** Özellikle tehlikeli kimyasallara veya biyolojik tehlikelere maruz kalınan ortamlarda kullanım sonrasında, kullanılan eldivenler tehlikeli modeller veya enfekte etkenlerle kirlenmiş olabilir. Eldivenleri, tehlikeli veya biyolojik tehlike taşıyan maddelerle ilgili Yerel Yetkili Yönetmeliklerine uygun şekilde bertaraf edin. Kirlenmeyi veya çevreye zarar vermeyi önlemek için eldivenleri kontrollü koşullar altında, gerekli olduğu şekilde depolayın veya yakın.

### Mekanik Riskler için Koruyucu Eldivenler (EN 388:2016+A1:2018)

Tüm testler avuç içinde laboratuvar koşullarında yapılmıştır. İlgili performans seviyeleri buna göre belirlenmiştir.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| EN 388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EN darbe direnci. (evet/hayır) |
| <div><div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div></div></div> | ISO kesilme direnci. A–F       |
| a b c d e f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Delinme direnci. 0–4           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Yırtılma direnci. 0–4          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kesilme direnci. 0–5           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aşınma direnci. 0–4            |

EN 388:2016+A1:2018'e göre tüm performans seviyeleri (maksimum performans seviyesi: 4, kesilme direnci için: 5, ISO kesilme direnci için: F) sadece eldivenin avuç içi alanı için geçerlidir. X seviyesi ayrıca a'dan e'ye kadar uygulanabilir ve "Test edilmedi" veya "Uygulanamaz" anlamına gelir. Kesilme direnci testinde körelme durumunda, coup testi sonuçları yalnızca yol göstericidir, TDM kesilme direnci testi ise referans performansdır.

### Tehlikeli Kimyasallara Karşı Koruyucu Eldivenler (EN ISO 374–1:2016)

Bu eldivenler, tehlikeli kimyasallara karşı koruma sağlamak için EN ISO 374–1:2016 gerekliliklerine uygun olarak test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır.

### Rękawice ochronne przeciwko niebezpiecznym chemikaliom (EN ISO 374–1:2016)

Te rękawice zostały przetestowane i certyfikowane w zakresie ochrony przed niebezpiecznymi chemikaliami, zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 374–1:2016. Rękawice zapewniają skuteczną barierę przed zagrożeniami chemicznymi, zapewniając solidną ochronę w środowiskach, gdzie prawdopodobne jest narażenie na działanie niebezpiecznych substancji.

### Piktogram i poziomy wydajności zgodnie z normą EN 374:2016

Rękawice ochronne przed chemikaliami są klasyfikowane na trzy typy w zależności od ich wydajności przepuszczalności:

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN ISO 374–1:2016/Type A<br>Specyfikacja co najmniej sześciu substancji chemicznych testowanych                                                                                                                                                   | EN ISO 374–1:2016/Type B<br>Specyfikacja co najmniej trzech substancji chemicznych testowanych                                                                                                                                                    | EN ISO 374–1:2016/Type C<br>Specyfikacja co najmniej jednej substancji chemicznej testowanej                                                                                                                                                      |
| <div><div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div></div></div> | <div><div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div></div></div> | <div><div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div></div></div> |
| UWVWYZ                                                                                                                                                                                                                                            | XYZ                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Lista przetestowanych substancji chemicznych zgodnie z EN ISO 374–1:2016:

| LIST KODOWY | CHEMICZNY               | NUMER CAS | KLASA                                     |
|-------------|-------------------------|-----------|-------------------------------------------|
| A           | Metanol                 | 67–56–1   | Alkohol pierwszorzędowy                   |
| B           | Aceton                  | 67–64–1   | Keton                                     |
| C           | Acetonitryl             | 75–05–8   | Związek nitrylowy                         |
| D           | Dichlorometan           | 75–09–2   | Chlorowany węglowodor                     |
| E           | Dwusiarczek węgla       | 75–15–0   | Związek organiczny zawierający siarkę     |
| F           | Toluen                  | 108–88–3  | Węglowodor aromatyczny                    |
| G           | Dietyloamina            | 109–89–7  | Amina                                     |
| H           | Tetrahydrofuran         | 109–99–9  | Związek heterocykliczny i eterowy         |
| I           | Octan etylu             | 141–78–6  | Ester                                     |
| J           | n-Heptan                | 142–82–5  | Węglowodor nasycony                       |
| K           | Wodorotlenek sodu 40%   | 1310–73–2 | Zasada nieorganiczna                      |
| L           | Kwas siarkowy 96%       | 7664–93–9 | Nieorganiczny kwas mineralny, utleniający |
| M           | Kwas azotowy 65%        | 7697–37–2 | Nieorganiczny kwas mineralny, utleniający |
| N           | Kwas octowy 99%         | 64–19–7   | Kwas organiczny                           |
| O           | Wodorotlenek amonu 25%  | 1336–21–6 | Zasada organiczna                         |
| P           | Nadtlenek wodoru 30%    | 7722–84–1 | Nadtlenek                                 |
| S           | Kwas fluorowodorowy 40% | 7664–39–3 | Nieorganiczny kwas mineralny              |
| T           | Formaldehyd 37%         | 50–00–0   | Aldehyd                                   |

### Tabela odniesienia poziomów wydajności przepuszczalności:

| Poziomy wydajności przenikania |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Zmierzony czas przebicia (min) | Poziom wydajności przenikania |
| >10                            | 1                             |
| >30                            | 2                             |
| >60                            | 3                             |
| >120                           | 4                             |
| >240                           | 5                             |
| >480                           | 6                             |

Informacje te nie odzwierciedlają rzeczywistego czasu ochrony w miejscu pracy ani różnic między mieszaninami a czystymi chemikaliami.

Odporność chemiczna została oceniona w warunkach laboratoryjnych na podstawie próbek pobranych jedynie z dłoni (z wyjątkiem przypadków, gdy rękawica ma długość co najmniej 400 mm — wtedy testowana jest również mankiet) i odnosi się tylko do przetestowanej substancji chemicznej. Może się różnić, jeśli substancja chemiczna jest stosowana w mieszaninie.

Zaleca się sprawdzenie, czy rękawice nadają się do zamierzonego zastosowania, ponieważ warunki w miejscu pracy mogą różnić się od testu typowego w zależności od temperatury, ścierania i degradacji.

Podczas użycia rękawice ochronne mogą zapewniać mniejszy opór wobec niebezpiecznych chemikaliów z powodu zmian w właściwościach fizycznych. Ruchy, zaczepianie, tarcie, degradacja spowodowana kontaktem chemicznym itp. mogą znacznie skrócić rzeczywisty czas użytkowania. W przypadku chemikaliów korozyjnych degradacja może być najważniejszym czynnikiem do rozważenia przy wyborze rękawic odpornych na chemikalia.

Przed użyciem sprawdź rękawice pod kątem wad lub niedoskonałości.

### Rękawice ochronne przeciwko niebezpiecznym chemikaliom i mikroor-ganizmom (EN ISO 374–5:2016)

Te rękawice zostały przetestowane i certyfikowane w celu ochrony przed bakteriami, grzybami i (w razie potrzeby) wirusami, zgodnie z wymaganiami EN ISO 374–5:2016. Rękawice zapewniają skuteczną barierę przeciwko mikroorganizmom, zapewniając wysoki poziom ochrony w środowiskach narażonych na zagrożenia biologiczne.

### Piktogram i poziomy wydajności:

Rękawice spełniają normy ochrony przed mikroorganiz– mami, a poniższe piktogramy wskazują ich zgodność:

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN ISO 374–5                                                          | <div><div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div></div></div> |
| Oczyszczenie rękawic ochronnych przeciwko bakteriom i grzybom         |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| EN ISO 374–5                                                          | <div><div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div></div></div> |
| Oczyszczenie rękawic ochronnych przed wirusami, bakteriami i grzybami |                                                                                                                                                                                                                                                   |

Jeśli rękawice są certyfikowane do ochrony przed wirusami, piktogram będzie zawierał oznaczenie "VIRUS", potwierdzające, że przeszły dodatkowe testy na ochronę przed wirusami.

### Odporność na penetrację:

Odporność na penetrację została oceniona w warunkach laboratoryjnych zgodnie z normą EN 374–2 i dotyczy wyłącznie badanego próbki.

**Ostrzeżenie:** Plastikowe torby mogą być niebezpieczne. Aby uniknąć ryzyka uduszenia, trzymaj tę torbę z dala od niemowląt i dzieci. Niektóre rękawice mogą zawierać składniki, które są znane z wywoływania alergii u wrażliwych osób. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznych natychmiast skonsultuj się z lekarzem. Nie należy nosić, gdy istnieje ryzyko wplątania się w ruchome części maszyn. Nie nadaje się do stosowania w pobliżu otwartego ognia, środowisk o wysokiej temperaturze, ostrych przedmiotów, spiczastych przedmiotów lub prac elektrycznych.

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data ważności.                                                                                                                                                                                                                                    | Data produkcji.                                                                                                                                                                                                                                   | Producent.                                                                                                                                                                                                                                        |
| <div><div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div></div></div> | <div><div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div></div></div> | <div><div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div></div></div> |
| Miesiąc/Rok                                                                                                                                                                                                                                       | Miesiąc/Rok                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Znak CE.                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                   | Przeczytaj instrukcję i informacje producenta.                                                                                                                                                                                                    |
| <div><div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div></div></div> | <div><div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div></div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                   |

### WYPRODUKOWANO W CHINACH

Eldivenler, tehlikeli maddelere maruz kalma olasılığı yüksek olan ortamlarda sağlam koruma sağlayarak kimyasal tehlikelere karşı etkili bir bariyer oluşturur.

### EN 374:2016'ya uygun olarak piktogram ve performans seviyeleri

Kimyasallara karşı koruyucu eldivenler, geçirgenlik performanslarına bağlı olarak üç tipe ayrılır:

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN ISO 374–1:2016/Type A<br>En az altı test kimyasalının spesifikasyonu                                                                                                                                                                           | EN ISO 374–1:2016/Type B<br>En az üç test kimyasalının spesifikasyonu                                                                                                                                                                             | EN ISO 374–1:2016/Type C<br>En az bir test kimyasalının spesifikasyonu                                                                                                                                                                            |
| <div><div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div></div></div> | <div><div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div></div></div> | <div><div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div></div></div> |
| UWVWYZ                                                                                                                                                                                                                                            | XYZ                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |

### EN ISO 374–1:2016'ya göre test edilen kimyasalların listesi:

| KOD HARFİ | KIMYASAL              | CAS NUMARASI | SINIF                               |
|-----------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|
| A         | Metanol               | 67–56–1      | Birincil alkol                      |
| B         | Aseton                | 67–64–1      | Keton                               |
| C         | Asetonitril           | 75–05–8      | Nitril bileşiği                     |
| D         | Diklorometan          | 75–09–2      | Klorlu hidrokarbon                  |
| E         | Karbon disülfür       | 75–15–0      | Kükürt içeren organik bileşik       |
| F         | Toluen                | 108–88–3     | Aromatik hidrokarbon                |
| G         | Dietylamin            | 109–89–7     | Amin                                |
| H         | Tetrahidrofuran       | 109–99–9     | Heterosiklik ve eter bileşiği       |
| I         | Etil asetat           | 141–78–6     | Ester                               |
| J         | n-Heptan              | 142–82–5     | Doymuş hidrokarbon                  |
| K         | Sodyum hidroksit %40  | 1310–73–2    | İnorganik baz                       |
| L         | Sülfürik asit %96     | 7664–93–9    | İnorganik mineral asit, oksitleyici |
| M         | Nitrik asit %65       | 7697–37–2    | İnorganik mineral asit, oksitleyici |
| N         | Asetik asit %99       | 64–19–7      | Organik asit                        |
| O         | Amonyum hidroksit %25 | 1336–21–6    | Organik baz                         |
| P         | Hidrojen peroksit %30 | 7722–84–1    | Peroksit                            |
| S         | Hidroflorik asit %40  | 7664–39–3    | İnorganik mineral asit              |
| T         | Formaldehit %37       | 50–00–0      | Aldehit                             |

### Geçirgenlik Performans Seviyeleri Referans Tablosu:

| Geçirgenlik Performans Seviyeleri |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Ölçülen Atılım Süresi (dk)        | Geçirgenlik Performans Seviyesi |
| >10                               | 1                               |
| >30                               | 2                               |
| >60                               | 3                               |
| >120                              | 4                               |
| >240                              | 5                               |
| >480                              | 6                               |

Bu bilgi, iş yerindeki gerçek koruma süresini ve karışımlar ile saf kimyasallar arasındaki farkı yansıtmaz.

Kimyasal direnç, yalnızca avuç içinden alınan numunelerden (eldiven 400 mm veya daha uzun olmadıkça — bu durumda manşet de test edilir) alınarak laboratuvar koşullarında değerlendirilmiş olup, yalnızca test edilen kimyasal madde ile ilgilidir. Kimyasal bir karışımda kullanıldığında farklılık gösterebilir.

Eldivenlerin, sıcaklık, aşınma ve bozulmaya bağlı olarak iş yerindeki koşulların tip testinden farklı olabileceği için amaçlanan kullanım için uygun olup olmadığını kontrol etmek önerilir.

Kullanıldığında, koruyucu eldivenler fiziksel özelliklerdeki değişiklikler nedeniyle tehlikeli kimyasallara karşı daha düşük direnç sağlayabilir. Hareketler, takımlar, sürtünmeler, kimyasal temas nedeniyle oluşan bozulmalar vb. gerçek kullanım süresini önemli ölçüde kısaltabilir. Aşındırıcı kimyasallar için, bozulma kimyasal dirençli eldivenlerin seçiminde en önemli faktör olabilir.

Kullanımdan önce, eldivenleri herhangi bir kusur veya hata açısından kontrol edin.

### Tehlikeli kimyasallara ve mikroorganizmalara karşı koruyucu eldivenler (EN ISO 374–5:2016)

Bu eldivenler, EN ISO 374–5:2016 gerekliliklerine uygun olarak bakteriler, mantarlar ve (uygunsu) virüslere karşı koruma için test edilmiştir ve sertifikalandırılmıştır. Eldivenler, mikroorganizmalara karşı etkili bir bariyer sağlar ve biyolojik tehlikelere maruz kalan ortamlarda yüksek seviyede koruma sağlar.

### Piktogram ve Performans Düzeyleri:

Eldivenler mikroorganizmalara karşı koruma standartlarını karşılar ve aşağıdaki piktogram uyumlarını gösterir:

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN ISO 374–5                                                                | <div><div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div></div></div> |
| Bakteriler ve mantarlar karşı koruma sağlama için eldivenleri etiketlenmesi |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| EN ISO 374–5                                                                | <div><div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div></div></div> |
| VIRUS                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Virüs, bakteri ve mantarları karşı koruyucu eldivenleri etiketlenmesi       |                                                                                                                                                                                                                                                   |

Bu eldivenler mikroorganizmalara karşı sağlam bir koruma sağlasa da, yoğun kimyasal maruziyeti veya tekrarlanan kullanım sonrasında etkinlikleri azalabilir. Kullanıcılar eldivenleri düzenli olarak kontrol etmeli ve hasar, aşınma veya bozulma belirtileri gösterdiğinde değiştirmelidir.

### Nüfuz Direnci:

Nüfuz direnci, EN 374–2'ye uygun olarak laboratuvar koşullarında değerlendirilmiş olup yalnızca test edilen numuneyle ilgilidir.

**Uyarı:** Plastik torbalar tehlikeli olabilir. Boğulma riskini önlemek için bu torbayı bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. Bazı eldivenler hassas kişilerde alerjiye neden olduğu bilinen bileşenler içerebilir. Alerjik reaksiyonlar meydana gelirse, derhal tıbbi yardım alın. Hareketli makine parçalarına dolanma riski olduğunda giylimemelidir. Açık alevlerin, yüksek sıcaklıktaki ortamların, keskin nesnelerin, sivri nesnelerin veya elektrik işlerinin yakınında kullanıma uygun değildir.

|                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Son kullanma tarihi.                                                                  | Üretim tarihi.                                                                        | Üretici.                                                                              |
|  |  |  |
| Ay/Yıl                                                                                | Ay/Yıl                                                                                |                                                                                       |
| CE İşareti.                                                                           |                                                                                       | Üreticinin talimatlarını ve bilgilerini okuyun.                                       |
|  |  |                                                                                       |